



United States
175 Pineview Drive
Amherst, New York 14228
800-533-6825
Fax: 716-691-2285
www.ivoclarvivadent.com

Canada
#1 - 6600 Dixie Road
Mississauga, Ontario L5T 2Y2
800-263-8182
Fax: 905-670-3102
www.ivoclarvivadent.com



Ivoclar Vivadent AG,
FL-9494 Schaan/Liechtenstein

100% CUSTOMER SATISFACTION
GUARANTEED!

ivoclarvivadent.com

©2014 Ivoclar Vivadent, Inc.
AccuDent and Ivoclar Vivadent are
registered trademarks of Ivoclar Vivadent.
Rev.1 7/2014



AccuDent® XD

Alginate Tray Adhesive

Instructions for Use
Mode d'emploi
Instrucciones de Uso

Adhesive for alginate impression materials
Adhesivo para materiales de impresión de alginate
Colle pour matériaux d'empreinte alginate

Rx
For dental use only!

Made in USA for
Ivoclar Vivadent, Inc.



Clean up with Isopropyl Alcohol.

Warnings
— Isopropyl alcohol and toluene are hazardous to health
— Avoid contact between AccuDent XD Tray Adhesive and skin, mucous membrane, and eyes; if contact should occur, rinse thoroughly with running water for 10 minutes; with the affected eye open. Consult ophthalmologist. If the material comes into contact with the skin, immediately wash affected areas with water.
— Do not inhale vapor.
— Close container after use.
— Keep the product away from flame and sparks.
— Attention: May stain clothing.

Storage
— Do not use AccuDent XD Adhesive after the indicated date of expiration.
— Close bottle immediately after use.
— Do not use material if the individual components show clear signs of change of consistency;
— Storage temperature: 0 – 30° C (32 – 86° F)
— Shelf life: See expiration date on label and packaging.

Keep out of the reach of children!

Caution
Contents are flammable. Keep out of reach of children and from sparks or open flame. Do not ingest. See MSDS for chemical make-up at www.ivoclarvivadent.com.

For use in dentistry only!
The material has been developed solely for use in dentistry. Processing should be carried out strictly according to the instructions for Use. Liability cannot be accepted for damages resulting from failure to observe the instructions or the stipulated area of application. The user is responsible for testing the material for its suitability and use for any purpose not explicitly stated in the instructions. Descriptions and data constitute no warranty of attributes and are not binding.

Description
Self-curing, single-component adhesive for alginate based impression materials.

Composition
Contains polyamide resin and solvent.

Indication
AccuDent XD Tray Adhesive is specifically intended for the adhesion of cured alginate impression materials to standard metal and plastic trays.


Contraindication
— If the patient is known to be allergic to any of the ingredients in AccuDent XD Tray Adhesive.
— Adhesive should only be used with disposable trays.

Side Effects
AccuDent XD Tray Adhesive may cause a sensitization reaction in patients with a longer be applied.

Interactions
None

Application

1. Be sure that all surfaces of the impression tray are oil-free, clean and dry. NOTE: If the disinfection of the impression tray cannot be ensured, the tray adhesive must be poured into a disposable container and applied using a disposable brush.
2. Apply a thin layer of AccuDent XD Tray Adhesive using a brush to all surfaces of the impression tray (metal or plastic) that will come into contact with the impression material.
3. Allow the tray adhesive to dry for approximately 3-5 minutes (or blow dry with compressed oil-free air).
4. Replace the bottle cap immediately.

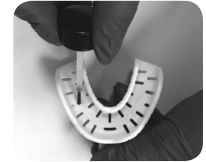

ESP

Descripción

Adhesivo de componente único y autocurable para materiales de impresión a base de alginato.

Composición

Contiene resina de poliamida y disolvente.

Indicación

El adhesivo para cubetas AccuDent XD está específicamente indicado para la adhesión de materiales de impresión de alginato curados a cubetas estándar de metal y plástico.

Contraindicación

- Si se sabe que el paciente es alérgico a cualquiera de los ingredientes del adhesivo para cubetas AccuDent XD.
- Si la cubeta no se puede limpiar y secar adecuadamente.
- El adhesivo solo debería usarse con bandejas desechables.


Efectos secundarios

El adhesivo para cubetas AccuDent XD puede causar una reacción de sensibilidad en pacientes con hipersensibilidad a cualquiera de los ingredientes. En estos casos, el material debe dejar de aplicarse.

Interacciones

None

Aplicación

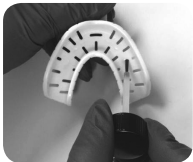

1. Asegúrese de que todas las superficies de la cubeta de impresión estén libres de aceite, limpias y secas. NOTA: Si no se puede garantizar la desinfección de la cubeta de impresión, el adhesivo debe colocarse en un vaso Dappen y aplicarse usando un cepillo desechable.
2. Utilice un pincel para aplicar una capa delgada de adhesivo para cubetas AccuDent XD en toda la superficie de la cubeta de impresión (metal o plástico) que estará en contacto con el material de impresión.
3. Deje secar el adhesivo durante unos 3-5 minutos (o seque con aire comprimido sin aceite).
4. Vuelva a tapar el frasco inmediatamente.

Limpieza

Limpie con alcohol isopropílico.

Advertencias

- El alcohol isopropílico y el tolueno son peligrosos para la salud
- Evite el contacto entre el adhesivo de la cubeta AccuDent XD y la piel, las membranas mucosas y los ojos; si se produjera el contacto, enjuague abundantemente con agua corriente durante 10 minutos, con el ojo afectado abierto. Consulte a un oftalmólogo. Si el material entra en contacto con la piel, lave con agua de inmediato las zonas afectadas.
- No inhale el vapor.
- Cierre el envase después de usarlo.
- Mantenga el producto lejos de llamas y chispas.
- Atención: Puede manchar la ropa

Almacenamiento

- No use el adhesivo AccuDent XD después de la fecha de caducidad indicada.
- Cierre el frasco inmediatamente después de usarlo.
- No use el material si los componentes individuales muestran signos evidentes de cambio de consistencia.
- Temperatura de almacenamiento: 0 – 30 °C (32 – 86 °F)
- Vida útil: Consulte la fecha de caducidad en la etiqueta y el envase.

¡Mantenga lejos del alcance de los niños!

Precaución

El contenido es inflamable. Mantenga lejos del alcance de los niños y de chispas y llamas expuestas. No lo ingiera. Consulte la hoja de seguridad de los materiales (MSDS) para conocer la composición química en www.ivoclardivadent.com

¡Solo para uso en odontología!

Este material se ha desarrollado únicamente para su uso en odontología. El procesamiento debe realizarse siguiendo estrictamente las instrucciones de uso. No puede aceptarse responsabilidad por daños derivados del incumplimiento de las instrucciones o la zona de aplicación indicada. El usuario es responsable de comprobar la idoneidad del material y de su uso para cualquier objetivo no indicado específicamente en las instrucciones. Las descripciones y datos no constituyen una garantía de los atributos ni son vinculantes

FR

Description

Adhésif autopolymérisable à un élément pour produits pour empreinte à base d'alginate.

Composition

Contient de la résine polyamide et un solvant.

Indication

L'adhésif pour porte-empreinte AccuDent XD est spécifiquement conçu pour l'adhésion de produits pour empreinte à base d'alginate polymérisés aux porte-empreintes standards en métal ou en plastique.

Contre-indication

- Si le patient est allergique à l'un des ingrédients de l'adhésif pour porte-empreinte AccuDent XD.
- Si le porte-empreinte n'est pas bien nettoyé et séché.
- L'adhésif ne doit être utilisé qu'avec les gouttières jetables.

Effets secondaires

L'adhésif pour porte-empreinte AccuDent XD peut entraîner une sensibilisation chez les patients hypersensibles à l'un ou l'autre des ingrédients. Le cas échéant, l'application du produit doit être interrompue.

Interactions

Aucune

Application



1. S'assurer que toutes les surfaces du porte-empreinte sont exemptes d'huile, et qu'elles sont propres et sèches. REMARQUE : Si l'on ne peut garantir la désinfection du porte-empreinte, l'adhésif pour porte-empreinte doit être rempli dans un godet Dappen et appliqué au moyen d'un pinceau jetable.
2. Appliquer une fine couche d'adhésif pour porte-empreinte AccuDent XD à l'aide d'un pinceau sur toutes les surfaces du porte-empreinte (métal ou plastique) qui entreront en contact avec le matériau à empreinte.
3. Laisser sécher l'adhésif pour porte-empreinte de 3 à 5 minutes (ou sécher au moyen d'un séchoir à air comprimé exempt d'huile).
4. Remettre immédiatement le bouchon sur le flacon.

Nettoyage

Nettoyer avec de l'alcool isopropylique.

Avertissements

- L'alcool isopropylique et le toluène sont dangereux pour la santé.
- Éviter le contact de l'adhésif pour porte-empreinte AccuDent XD avec la peau, les marqueuses ou les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau courante pendant 10 minutes, en maintenant les paupières ouvertes dans le cas des yeux. Consulter un ophtalmologiste. Si le produit entre en contact avec la peau, laver immédiatement les parties touchées avec de l'eau.
- Ne pas respirer la vapeur.
- Fermer le contenant après l'usage.
- Garder le produit loin des flammes et des étincelles.
- Attention : peut tacher les vêtements

Entreposage

- Ne pas utiliser l'adhésif AccuDent XD après la date d'expiration indiquée.
- Fermer immédiatement le flacon après l'usage.
- Ne pas utiliser le produit si la consistance des composants individuels est manifestement altérée.
- Température d'entreposage : 0 – 30 °C (32 – 86 °F)
- Durée de vie : voir la date d'expiration sur l'étiquette et l'emballage.

Garder hors de la portée des enfants!

Mise en garde

Le contenu est inflammable. Garder hors de la portée des enfants et loin des étincelles et des flammes nues. Ne pas ingérer ce produit. Voir la fiche signalétique du fournisseur pour la constitution chimique à www.ivoclardivadent.com.

Pour usage en dentisterie seulement!

Ce produit a été conçu pour une utilisation en dentisterie seulement. Son utilisation doit se faire conformément aux instructions d'utilisation. Aucune responsabilité ne peut être assumée en ce qui concerne les dommages résultant du non-respect des instructions d'utilisation ou de l'utilisation autre que celle mentionnée. L'utilisateur est tenu de tester le produit pour toute utilisation ou application autre que celles expressément indiquées dans les instructions. Les présentes descriptions et données ne constituent aucune garantie et sont de caractère non exécutoire.